

# Oracle™ 452

ORAL MASK

## Hoja de Especificaciones


---

### Una Máscara de Suministro Oral



*La máscara oral Oracle™ 452 suministra presión por la boca y no por la nariz. Probada clínicamente para que funcione de forma tan eficaz como una máscara nasal\*, la máscara Oracle™ 452 es la perfecta solución para pacientes que respiran por la boca y pacientes con obstrucción nasal crónica.*

# Suministro Oral - Oracle™ 452

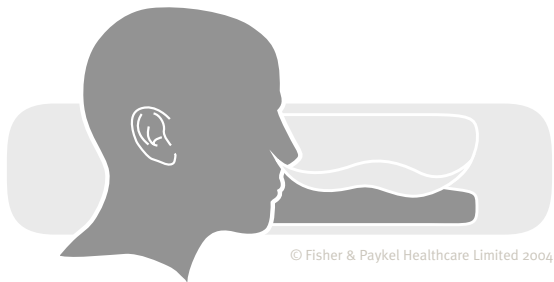

© Fisher & Paykel Healthcare Limited 2004

La Máscara Oral Oracle™ 452 es fácil de usar y sellar. Sin que tape ningún campo de visión, la máscara Oracle™ 452 proporciona total libertad de movimiento sólo equivalente al que ofrece la máscara nasal Infinity™ 481 Nasal Direct. La máscara Oracle™ 452 está completamente montada y preparada para su uso, sólo tiene que sacarla de la caja y usarla.

## MÁSCARA ÚNICA PARA UNA MAYOR LIBERTAD, CONFORT Y CUMPLIMIENTO



**El Arnés con correa única minimiza las molestias durante el sueño**

La Correa BREATH-O-PRENE™ es pequeña, ligera y cómoda, proporciona libertad de movimiento y no interfiere en el campo de visión. Los pacientes pueden elegir la posición del tubo Flexitube entre sus 360° de movimiento.



**Fácil Ajuste con Disco de Ajuste Giratorio**

Con el disco de ajuste giratorio se puede ajustar la distancia entre la cubierta SnatFlap™ y la pieza oral SoftSeal hasta alcanzar un ajuste personalizado. Es fácil de usar, simplemente girando el disco de ajuste. Se puede ajustar al mismo tiempo que se ajusta la máscara.



**Eficacia del Difusor del Flujo Sin ruidos durante su uso**

*Filtro de Material*  
Con este sistema avanzado de difusión de aire, el aire expulsado no alcanza a quien duerme a su lado y se reduce el ruido que pueda perturbar el sueño.



**Interacción entre la pieza oral SoftSeal y la cubierta SnapSeal™**

Sujeta los labios cómodamente entre la parte interna de la pieza oral SoftSeal y la externa de la cubierta SnapFlap™, evitando que se produzcan fugas. Estas dos técnicas se combinan para suministrar un sellado superior sencillo y un máximo confort.



**Correa para Retirar Fácilmente**  
Con un solo movimiento se puede retirar

Simplemente tirando de la correa en un solo movimiento, se retira la máscara del arnés. Para volver a colocarla, no es necesario reajustar el arnés.

## CONTENIDO

- Máscara completamente montada con Arnés y Tapones Nasales
- Se incluyen varios tamaños de piezas orales Silicone Softseal Mouthpiece (S, L)
- Manual de Fácil Colocación para el Usuario

CÓDIGO DE PEDIDO: HC452

## BIBLIOGRAFÍA

\* Smith PL, O'Donnell CP, Allan L et al. A physiologic comparison of nasal and oral positive airway pressure. Chest 2003; 123 (3):689-Anderson FE, Kingshott RN, Taylor DR et al. A randomized crossover efficacy trial of oral CPAP (Oracle) compared with nasal CPAP in the management of obstructive sleep apnea. Sleep 2003; 26 (6):721-6. \* Khanna R, Kline LR. A prospective 8 week trial of nasal interfaces vs. a novel oral interface (Oracle) for treatment of obstructive sleep apnea hypopnea syndrome. Sleep Med 2003; 4 (4):333-8. \* Beecroft J, Zanon S, Lukic D et al. Oral continuous positive airway pressure for sleep apnea: effectiveness, patient preference, and adherence. Chest 2003; 124 (6):2200-8.

PARA MAYOR INFORMACIÓN, POR FAVOR COMUNÍQUESE CON NUESTRO REPRESENTANTE LOCAL DE FISHER & PAYKEL HEALTHCARE:

**España** Tel: +34 902 013 346 Fax: +34 902 013 379

**Internacional** P O Box 14 348, Panmure Auckland 1134, Nueva Zelanda Tel: +64 9 574 0100 Fax: +64 9 574 0158 Correo electrónico: info@fphcare.com Web: www.fphcare.com

**EE.UU** Tel: 1800 446 3908 +1 949 470 3900 Fax: +1 949 470 3933 **Australia** Tel: +61 3 9879 5022 Fax: +61 3 9879 5232 **Austria** Tel: 0800 29 31 23 Fax: 0800 29 31 22

**Benelux** Tel: +31 78 644 0924 Fax: +31 78 644 0914 **China** Tel: +86 20 8363 4286 Fax: +86 20 8363 3595 **Francia** Tel: +33 1 6446 5201 Fax: +33 1 6446 5221 **Alemania** Tel: +49 7182 93777 0

Fax: +49 7182 93777 99 **India** Tel: +91 80 5123 6041 Fax: +91 80 5123 6044 **Irlanda** Tel: 1800 409 011 **Italia** Tel: +39 06 7839 2939 Fax: +39 06 7814 7709 **Japón** Tel: +81 3 3661 7205

Fax: +81 3 3661 7206 **Suiza** Tel: 0800 83 47 63 Fax: 0800 83 47 54 **Reino Unido (Representante autorizado para la UE)** Tel: +44 1628 626 136 Fax: +44 1628 626 146

**Irlanda del Norte** Tel: 0800 132 189